

聯華神通集團【第 23 屆育秀盃創意獎】

初賽作品企劃書（數位應用類）

參賽編號 (ID)	SA232597	隊伍名稱	Feels Team
作品名稱 (中文)	健康氣味雷達： 非侵入式病理檢測方案	作品名稱 (英文)	Health Odor Radar: A Non-Invasive Solution for Pathological Condition Screening

一、作品說明介紹(中英文合計 500 字)

隨著精準醫療與預防醫學的興起，如何個人化且廣泛普及已成為智慧醫療領域的關鍵議題。我們希望開發一種無痛、非侵入式的可攜式檢測裝置，讓患者作為個人化的健康篩檢工具。而氣體作為生物體內表現的特徵之一，身體代謝或症狀的變化往往表現在呼出氣體中的有機化合物(VOCs)上，像是許多慢性病（如糖尿病、腎臟病）在早期都會透過代謝產生特殊的氣味分子，而這也是所謂的「氣味指紋」，但人類嗅覺難以量化這些微小差異，導致治療錯失先機。因此我們開發基於人工智慧電子鼻的可攜式非侵入健康檢測原型系統(Health Odor Radar: A Non-Invasive Solution for Pathological Condition Screening)。系統架構以 BMduino 為核心控制，驅動多通道氣體感測器陣列，藉由不同感測元件對氣體分子的交叉敏感度，以此模擬生物嗅覺系統的感知機制。透過採集並利用 AI 分析人體代謝產生的揮發性有機化合物之「氣味指紋」，本系統能有效辨識與特定病理狀態相關的標誌性氣體。研究成果驗證了以非侵入性氣體感測技術作為未來醫療輔助篩檢工具的可行性。本方案為低成本、快速且便利的個人健康監測與遠距醫療應用，提供了前瞻性的技術實現路徑。

*請同步上傳於官網初賽繳件頁面，如有持續修正，官網部份可更新至決賽。

二、創新構想

- 居家健康監測：

作為個人化的健康篩檢工具，使用者可在家中定期進行簡單的氣味檢測，建立個人基礎健康氣味檔案，用於追蹤長期的生理狀態變化。

- 偏遠地區與基層醫療的初步篩檢：

在醫療資源相對匱乏的地區，本系統可作為一種低成本、易操作的初步分流工具。協助第一線醫護人員快速對大量民眾進行篩檢，找出可能需要進一步精密檢查的個案，提升公共衛生效率。

● 養老照顧機構的健康管理：

對於有慢性病（如糖尿病、腎臟病）的老人或行動不便者，本技術可提供一種無負擔的日常監測方案，協助照顧者及早發現異常生理跡象，實現預防性照顧。

● 特定工作環境的職業健康安全：

未來可針對特定職業環境（如化工廠、密閉空間）可能暴露的有害氣體進行監測，並保障工作人員的健康與安全。

三、 功能介紹、系統架構、操作介面、規格說明

01、功能介紹

本作品開發一套整合金屬氧化物氣體感測器陣列、嵌入式系統與機器學習算法的醫療電子鼻系統，旨在透過分析人體呼氣中的揮發性有機化合物，實現對肝衰竭與腎衰竭的非侵入性、快速、低成本輔助診斷。系統採用專為醫療氣體檢測優化的感測器組合，結合特徵工程與集成學習模型，而下表為各種病症及氣味特徵。

病症	可能產生的特徵氣味描述	相關的揮發性有機化合物 (VOCs)	注意事項	可行性
糖尿病 酮酸中毒	爛蘋果味、丙酮味	丙酮、異戊二烯	研究廣泛、特徵明顯的之一	高
肝衰竭 (肝昏迷)	霉甜味、臭雞蛋味、略帶腥臭味	硫醇類（如甲硫醇）、二甲基硫醚、氨	肝病產生氣味複雜，但硫化物特徵明確。	中高
腎衰竭 (尿毒症)	尿騷味、氨水味	氨、尿素分解產物	氨氣是極常見的氣體。	高
肺膿瘍 / 支氣管擴張	腐敗性惡臭	揮發性硫化物（硫化氫、甲硫醇）、屍胺、糞臭素	氣味強烈，但需與口腔問題（如牙周病）區分。	中
假單胞菌感染（常見於燒傷或囊腫性纖維化患者傷口）	葡萄汁味、發霉味、甜味	2-氨基苯乙酮	這是特定細菌的代謝產物，具有研究潛力，但需要非常特異性的傳感器。	中
嚴重牙周病 / 口腔衛生不良	腐敗惡臭	揮發性硫化物（硫化氫、甲硫醇）	容易取得樣本（口臭），適合作為概念驗證的起點。	高

表一：各種病症及其氣味特徵表

疾病類型	主要生物標誌物	氣味特徵	濃度範圍(ppb)
肝衰竭	二甲基硫醚、乙硫醇	爛菜味、硫磺味	50-200
腎衰竭	氨氣、三甲胺	尿味	100-500
糖尿病	丙酮、異戊二烯	爛蘋果味、丙酮味	>200

表二：病症與其有機化合物 VOCs 濃度比較


而其中生物特徵明顯的疾病則為我們裝置的主要對象，其中就包含糖尿病、肝衰竭、腎衰竭等，目前肝衰竭與腎衰竭的診斷主要依賴有：

- 血液生化檢測：ALT、AST、BUN、Creatinine 等指標
- 影像學檢查：超音波、CT 等
- 組織切片：侵入性檢查，風險較高

現有方法雖然測量準確，但仍有不少局限性：

- 檢測時間長（數小時至數天）
- 需要專業設備與人員，造成偏遠地區醫療資源不足
- 成本較高，不適合大規模篩查
- 侵入性採樣造成患者不適

因此我們將本系統整合多通道金屬氧化物半導體（MOS）氣體感測器陣列與 AI 分析兩大核心功能，精確捕捉人體呼氣中微量的揮發性有機化合物（VOCs）變化。把原本無形的『氣味』轉換成電腦看得懂的『數位訊號』。接著，系統會去分析這些訊號的特徵，再經由統計分類模型解析「氣味指紋」。最終，系統能自動辨識潛在的代謝異常或特定病理狀態，並即時輸出視覺化的檢測結果，達成低成本、非侵入式的智慧健康篩檢目標。

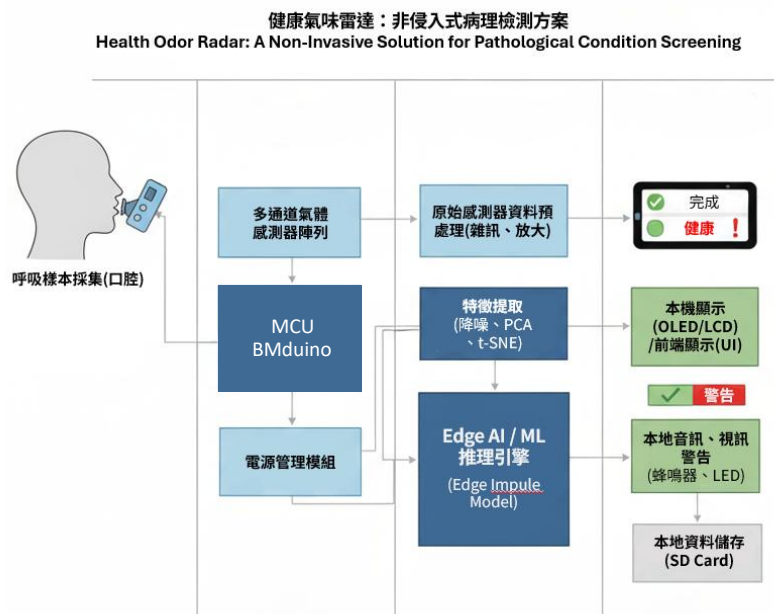

圖一：系統示意圖

02、規格說明

(1) 主控制器：BMduino

BMduino-UNO BM53A367A 是一款由倍創 (Best Modules) 推出的 32 位元開發板，採用 Arm Cortex-M0+ 內核的 Holtek HT32F52367 作為主控 MCU，運算頻率可達 60MHz。此開發板最大的特色在於硬體腳位與 Arduino UNO R3 完全相容，讓初學者能無縫接軌並輕鬆學習程式設計。它配備了 256KB Flash、32KB SRAM 以及 4KB EEPROM，並提供多達 31 個數位 I/O 腳位（含 17 個 PWM 輸出）與 7 個類比輸入。



圖二：BMduino

(2) 電阻式檢測感測器(MQ-136、MQ-137、Tgs1820)

- ◆ MQ135：專門檢測氨氣和三甲胺等含氮化合物，這些是腎衰竭的重要生物標誌物。該感測器對氨氣具有高靈敏度，檢測範圍涵蓋臨床相關的濃度區間。
- ◆ MQ136：針對硫化氫和二甲基硫醚等含硫化合物進行檢測，這些物質是肝衰竭的關鍵指標。
- ◆ Tgs1820：對丙酮具有高靈敏度使辨別性，有利於對糖尿病的篩檢。

(3) ADC：ADS1115

高品質 16 位元類比數位轉換器 (ADC)，ADS1115 的差分輸入模式與高解析度提供了莫大幫助。因其高精度、低功耗及體積小巧的特性，對於解析微弱的差分訊號而言是比內建 ADC 穩定許多的選擇。

(4) 升降壓：LM2596、LM317

- ◆ LM2596：一款開關型穩壓器 (Buck Converter)，因其在效率上具有壓倒性優勢。當輸入與輸出的壓差較大時，LM2596 能將大部分能量轉移至負載，通常效率可達 80% 至 90% 以上，雖然漣波問題會比較嚴重，但在處理大電流（最高 3A）時產生的熱量極低，因此負擔整個系統的電源供應。
- ◆ LM317：傳統的線性穩壓器，它透過內部電晶體的阻值變化來「消耗」掉多餘的壓差，因此效率較差。但在電壓穩定性方面，LM317 表現極為優異，它能提供非常純淨、平滑且幾乎沒有漣波的直流電，適合作為類比感測器的輸入電壓。

03、系統架構

(1) 系統架構

◆ 樣本採集與感測端：

使用者對著裝置吹氣，裝置會採集氣體並與多通道氣體感測器陣列發生反應，以此反饋到感測器的電導值上，以供 MCU 辨別獨特的氣味指紋。

◆ 訊號處理：


為了確保分析的精準度，系統先採用差分訊號來減少雜訊產生的干擾，然後透過濾波電路進一步去雜訊，最後在放大後接入 ADC 類比數位轉換器來轉換成可供讀取的數位訊號。



圖三：訊號處理示意圖

◆ 硬體運算核心：

作為運算核心的 BMduino 無法運行 Python 或 TensorFlow 等重型框架，因此我們採用 TinyML（微型機器學習）的開發流程：「PC 訓練，單晶片推理」來實現 AI 氣味辨識，而且由於 BMduino 的 SRAM 只有 32KB，所以比起大型的神經網路（CNN/RNN），我們決定採用 SVM（支援向量機）不僅僅運行速度極快，而且只佔用幾 KB 空間。

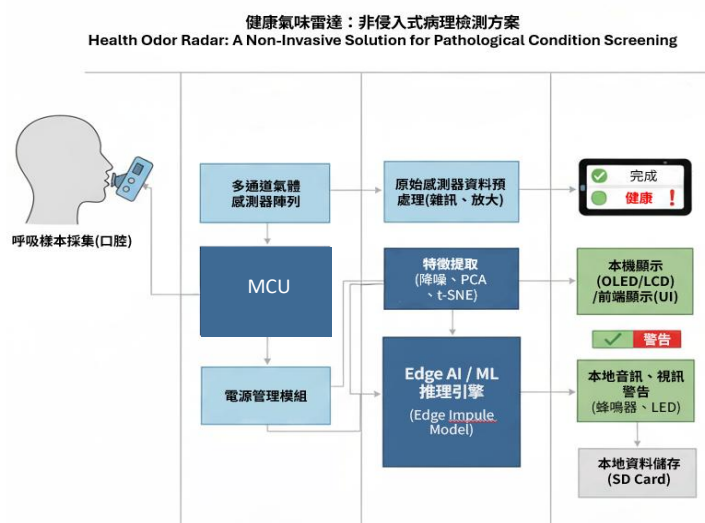

圖四：系統架構圖

04、操作介面

(1)健康人類

壓差值約莫 20mV 左右



V_to_V: 10.1250 mV
V_to_V: 11.2187 mV
V_to_V: 13.8125 mV
V_to_V: 15.8437 mV
V_to_V: 18.4375 mV
V_to_V: 20.7500 mV
V_to_V: 25.4688 mV
V_to_V: 24.3125 mV

圖五：健康人類與感測結果

(2)糖尿病模擬

壓差提高到 120mV



V_to_V: 3.7812 mV
V_to_V: 64.2813 mV
V_to_V: 119.9688 mV
V_to_V: 130.1250 mV
V_to_V: 126.9688 mV
V_to_V: 118.3750 mV
V_to_V: 111.8125 mV

圖六：糖尿病患者模擬結果

05、 其它(商業或服務模式…有助了解作品之說明)

◆ 作品核心價值與技術實現

本系統「Health Odor Radar」針對精準醫療與預防醫學需求，開發出一款無痛、非侵入式的可攜式檢測裝置。

- **技術核心：**以 BMduino 為控制核心，驅動多通道氣體感測器陣列。
- **生物感知模擬：**利用不同元件對氣體分子的「交叉敏感度 (Cross-sensitivity)」，模擬生物嗅覺機制。
- **AI 氣味指紋：**採集人體呼出氣體中的揮發性有機化合物 (VOCs)，透過 AI 演算法提取特定的「氣味指紋」，實現對糖尿病、腎臟病等代謝異常狀態的早期輔助篩檢。

◆ 商業模式與服務價值 (Business & Service Model)

我們致力於建立從「居家檢測」到「遠距醫療」的完整生態系：

1. **硬體基礎與數據服務 (SaaS)：**透過低成本硬體降低普及門檻，並提供 AI 深度病理分析報告之訂閱服務，將數據轉化為長期的健康管理價值。
2. **多層次應用場景：**
 - **居家監控：**使用者每日檢測，系統自動比對「個人健康基準線」，異常時即時預警。
 - **診所初篩：**作為基層醫療的「診前哨站」，快速分流高風險族群。
 - **遠距醫療：**將「氣味」數位化上傳雲端，補足現行遠距看診缺乏「聞診」數據的缺口。
3. **獲利路徑：**包含裝置銷售、專利抗菌耗材收入，以及與保險公司或藥企的數據授權合作。

◆ 市場目標客群與競爭優勢 (Market Analysis)

目標客群：慢性病管理族群（糖尿病/腎病）、銀髮長照機構、以及關注預防醫學的亞健康大眾。

競爭分析對照表：

評比項目	傳統臨床檢測 (抽血/尿檢)	現有市售生理量測 (血壓/血糖)	本作品
侵入性	高 (需扎針採血)	中/高 (血糖需採血)	極低 (僅需呼氣)
檢測成本	高 (人力與試劑)	中 (定期試紙費用)	低 (無昂貴耗材)
檢測速度	慢 (需等待實驗報告)	快 (數秒至數分鐘)	快 (AI 即時判讀)
操作難度	需專業人員操作	需忍受扎針不適	任何人皆可操作
核心優勢	指標精確但滯後	指標單一	多維度代謝特徵追蹤

◆ 未來開發規劃 (Future Roadmap)

為確保技術持續領先並成功落地，我們設定了明確的發展藍圖：

1. 短期：技術深化與微型化 (0-1 年)

- 擴充氣味資料庫：與醫療單位合作採集更多臨床 VOCs 樣本，提升 AI 對複雜氣體（如環境香水干擾）的過濾能力與辨識精準度。
- 硬體迭代：優化電路與氣室設計，進一步實現裝置微型化與低功耗驅動，提升可攜帶性。

2. 中期：臨床驗證與法規取證 (2-3 年)

- 臨床交叉驗證：啟動 IRB 臨床試驗，將氣味指紋數據與臨床金標準（如血糖、肌酸酐）進行對比，確保醫療級的靈敏度。
- 法規認證：導入醫療器材品質管理系統 (ISO 13485)，並向相關單位（如 TFDA/FDA）申請非侵入式輔助篩檢工具認證。

3. 長期：智慧醫療生態系建立 (3 年以上)

- 多病種應用：擴展至腸道健康（氫氣/甲烷）、肺部感染監測等領域。
- 無感式監測：將技術整合至智慧家居（如智慧廁所、智慧鏡），實現真正無感且長期的個人健康數位分身。

06、 作品圖

*可含程式設計流程圖、程式介面圖等

*如僅有海報和作品圖，請直接將圖檔上傳於官網初賽繳件頁面。A3 尺寸、JPEG 檔，300dpi，勿超過 5MB。

07、 專利、版權…(無，則不需要填寫)

08、 參與其它競賽、修改舊作說明…(無，則不需要填寫)

**【初賽作品企劃書請以 12 級字，內容不超過十頁(含圖片圖表等)，
撰寫完畢後，請將此報告上傳育秀盃競賽官方網站_初賽繳件頁面。】**